

# LASERVET 8.0

## LASERTHERAPIE

LASERVET 8.0 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR DIE LASERTHERAPIE MIT GEPULSTER HOCHLEISTUNG, DAS FÜR VETERINÄRMEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN EINGESETZT WIRD. DAS LASER HAT EINE POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE GEWEBEREGENERATION, AUF DIE POST-TRAUMATISCHE UND ENTZÜNDUNGHEMMENTE BEHANDLUNG UND HAT EINE SCHMERZSTILLENDE WIRKUNG IM FALLE VON AKUTEN UND CHRONISCHEN SCHMERZEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

#### Spitzenleistung

8W ±20%

#### Für Wellenlänge vorbereitet

808nm

980nm und 1064nm (optional)

#### Emission

Kontinuierlich und gepulst

#### Größe Target-Bereich

Linsen von Ø 11 mm

Linse von Ø 22 mm - Ø 60 mm (optional)

#### Frequenz

Bis zu 10000Hz

#### Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Abmessungen

100x160x35 mm

#### Gewicht

450 gr

### AUSSTATTUNG

· 1 Tasche


· 1 Gerät LASERVET 8.0

· 1 Handstück MP 808nm mit Linse von Ø 11 mm

· 2 Schutzbrillen

· 1 Ladegerät

· 1 Handbuch

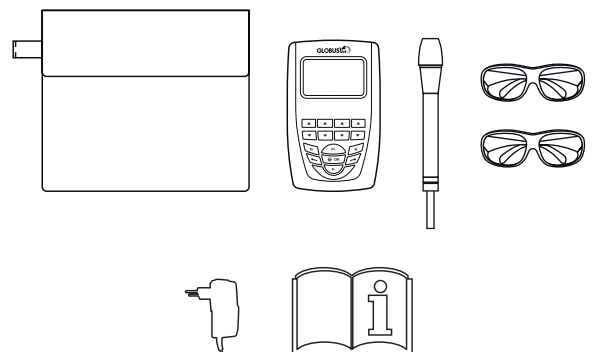

### VERFÜGBARE MODELLE

· Cod. G63474 Handstück MP 980nm

· Cod. G5996 Handstück 1064nm

· Cod. G6089 Linse Ø 60 mm

· Cod. G6092 Linse Ø 30 mm



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMIERBAR



VERMIETUNG-FUNKTION



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORUNG

# LASERVET 8.0

## LASERTHERAPIE

**MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:**

**Muskel- und Skeletterkrankungen** u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

**Pathologien des Integument-Systems** u.a. Hautwunden, Granulome, Anldrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

**Pathologien anderer Systeme** u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

