

# LASERVET 3.0

## LASERTHÉRAPIE

LE TRAITEMENT AVEC LASERVET 3.0 ACCÉLÈRE LA GUÉRISON DES TISSUS LÉSÉS ET AMÉLIORE LA CIRCULATION. IL EST IDÉAL POUR STIMULER LA CICATRISATION DES BLESSURES CUTANÉES ET IL EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR LE TRAITEMENT DE PLUSIEURS PATHOLOGIES MUSCULOSQUELETTIQUES CARACTÉRISÉES PAR INFLAMMATION ET DOULEUR. LA LASERTHÉRAPIE ACCÉLÈRE LA GUÉRISON ET LA DISPARITION DE LA DOULEUR, EN L'UTILISANT TOUTE SEULE AINSI QU'EN COMBINAISON AVEC D'AUTRES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT, CHEVAL, PETITS MAMMIFÈRES, REPTILES ET OISEAUX

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

#### Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

#### Puissance de pic

3W  $\pm$ 20%

#### Préparé pour la longueur d'onde

808nm

#### Émission

Pulsée et continue

#### Dimensions target area

Optique  $\varnothing$  11 mm

#### Fréquence

Jusqu'à 10000Hz

#### Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

#### Dimensions


100x160x35 mm

#### Poids

450 gr

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 3.0
- 1 Tête laser Black 808nm avec optiques  $\varnothing$  11 mm
- 2 Lunettes de protection
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

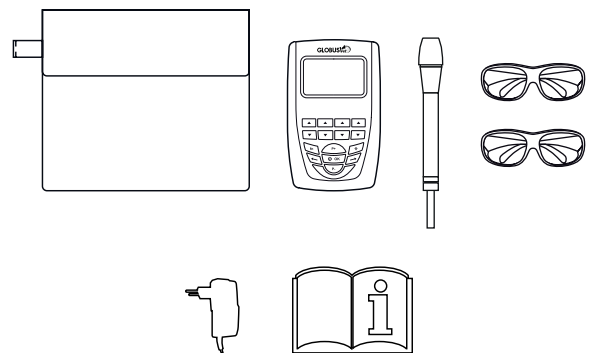

CE



- LAST 10
- MULTI-UTILISATEUR
- PROGRAMMABLE
- OPTION LOCATION
- PAQUET BATTERIE
- ALIMENTATION SECTEUR

# LASERVET 3.0

## LASERTHÉRAPIE

**PLUS DE 130 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, PETITS MAMMIFÈRES, OISEAUX ET REPTILES. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :**

**Maladies musculo-squelettiques** telles que l'arthrose, les tendinopathies, les ecchymoses, les bursites, les contractures et foulures musculaires, les fractures, la dysplasie, les neuropathies, etc ...

**Pathologies du système tégumentaire** telles que plaies cutanées, granulomes, sacculites, fistules périanales, pododermatites, écorchures etc ...

**Pathologies d'autres systèmes** telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

