

LASERVET 8.0

LASERTHÉRAPIE

LASERVET 8.0 EST UN APPAREIL PORTABLE POUR LA THÉRAPIE LASER À PUISSANCE ÉLEVÉE QUI PERMET DE RÉALISER RAPIDEMENT DES TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES. L'ACTION DU LASER VISE À LA RÉGÉNÉRATION DES TISSUS, AU TRAITEMENT POST-TRAUMATIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE ET À LA RÉDUCTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET AIGUË.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT, CHEVAL, PETITS MAMMIFÈRES, REPTILES ET OISEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

Puissance de pic

8W \pm 20%

Préparé pour la longueur d'onde

808nm

980nm et 1064nm (optionnelles)

Émission

Pulsée et continue

Dimensions target area

Optique \varnothing 11 mm

Optiques \varnothing 22 mm et \varnothing 60 mm (optionnelle)

Fréquence

Jusqu'à 10000Hz

Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

Dimensions


100x160x35 mm

Poids

450 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 8.0
- 1 Tête laser MP 808nm avec optiques \varnothing 11 mm
- 2 Lunettes de protection
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

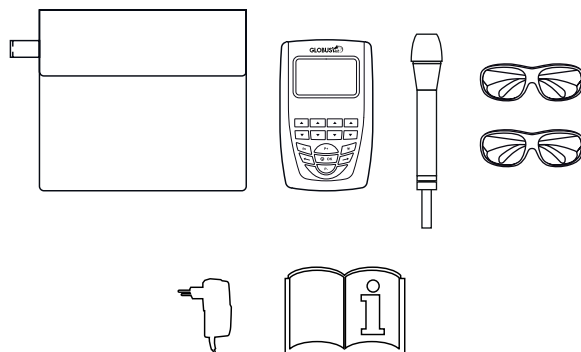







OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G6347 Tête MP 980nm
- Cod. G5996 Tête 1064nm
- Cod. G6089 Optique \varnothing 60 mm
- Cod. G6092 Optique \varnothing 22 mm

CE



-  LAST 10
-  MULTI-UTILISATEUR
-  PROGRAMMABLE
-  OPTION LOCATION
-  PAQUET BATTERIE
-  ALIMENTATION SECTEUR

LASERVET 8.0

LASERTHÉRAPIE

PLUS DE 130 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, PETITS MAMMIFÈRES, OISEAUX ET REPTILES. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :

Maladies musculo-squelettiques telles que l'arthrose, les tendinopathies, les ecchymoses, les bursites, les contractures et foulures musculaires, les fractures, la dysplasie, les neuropathies, etc ...

Pathologies du système tégumentaire telles que plaies cutanées, granulomes, sacculites, fistules périanales, pododermatites, écorchures etc ...

Pathologies d'autres systèmes telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

