

TECAR BEAUTY ELITE

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

TECAR BEAUTY EST UNE MÉTHODE NON INVASIVE QUI CONTRASTE LE VIEILLISSEMENT ET LE LAXITÉ DE LA PEAU. LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES PRODUITES PAR L'APPAREIL PÉNÈTRENT DANS LE DERMIS EN LIBÉRANT DE LA CHALEUR DANS LES TISSUS. CELA CAUSE STIMULE LA SYNTHÈSE DU NOUVEAU COLLAGÈNE ET DE L'ÉLASTINE, AMÉLIORANT VISIBLEMENT LA COMPACTÉ DE LA PEAU. DE PLUS, LA CHALEUR PRODUITE AIDE LA MICROCIRCULATION, FAVORISANT UNE MEILLEURE OXYGÉNATION DES TISSUS. APPAREIL PROFESSIONNEL ADAPTÉ AUX CENTRES ESTHÉTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran

Dimension 7" écran couleur tactile

Puissance

50W ±10% Capacitif
25W ±10% Résistif

Fréquence d'émission

400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Méthodes de traitement

Capacitif et Résistif

Électrodes Capacitives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

Électrodes Résistives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

Alimentation secteur

- 230V AC, 50-60Hz, 3,7A
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A

Dimensions

515x340x170 mm

Poids

11,5 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

· Cod. G6243

· 1 Dispositif TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Électrode de retour (plaque flexible)

· 1 Tête Resistive monopolaire avec 3 électrodes
Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête Capacitive monopolaire avec 3 électrodes
Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête bipolaire Ø (30 mm) Ø (30 mm)

· 1 Crème conductrice visage 500 ml à l'acide
hyaluronique

· 1 Crème conductrice 1000 ml pour le drainage
lymphatique, avec escine, fucus et caféine

· 1 Câble d'alimentation

· 1 Manuel d'utilisation



Conformément au décret interministériel no. 206/2015, l'appareil est approprié pour les centres de beauté.




TECAR BEAUTY ELITE

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

LISTE PROGRAMMES ATLAS ESTHÉTIQUE

VISAGE	FESSIERS
Rides	Vergetures
Contour des yeux	Raffermissment
Cicatrices acné	Cicatrices
Lifting	Drainage Lymphatique
Couperose	Réduction graisse
Massage relaxant	Cellulite œdémateuse
DÉCOLLETÉ	Cellulite fibreuse
Lifting	Cellulite sclérotique
Cicatrices	Massage
Raffermissment	DOS
BRAS-MAIN	Raffermissment
Rides	Cicatrices
Raffermissment	Massage
Rajeunissement	Réduction graisse
Cicatrices	CUISSES ET JAMBES
Vergetures	Vergetures
Réduction graisse	Raffermissment
ABDOMEN-FLANCS	Cicatrices
Réduction graisse	Drainage Lymphatique
Raffermissment	Drainage Lymphatique
Cicatrices	Cellulite œdémateuse
Vergetures	Cellulite fibreuse
	Cellulite sclérotique
	Massage

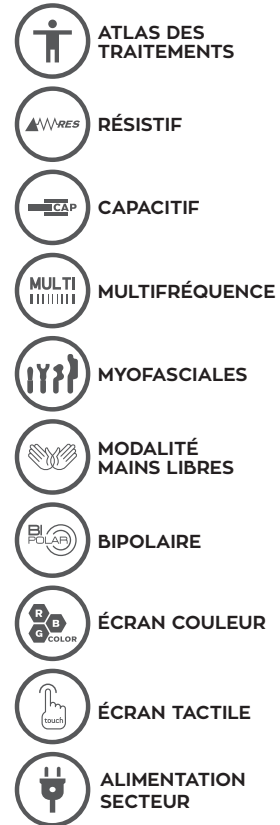

De plus, dans la **Section Prédéfinis-Esthétique** il y a 13 programmes prédéfinis pour des pathologies spécifiques qui peuvent être groupés en 5 différentes catégories de traitement.

CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES	CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES
Drainage lymphatique	1	Laxité cutanée	
Adiposités localisées		• Légère	1
• Pli < 4 cm	1	• Modérée	1
• Pli 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pli > 8 cm	1	Rajeunissement visage-décolleté	
Traitement cellulite		• Légère	1
• Cellulite légère	1	• Modérée	1
• Cellulite modérée	1	• Grave	1
• Cellulite grave	1		