

PRESSCARE G-SPORT³

PRESSOTHERAPIE | 3 AUFPUMP-PROGRAMME


GERÄT FÜR PNEUMATISCHE KOMPRESSION FÜR SPORTLER. ES WURDE ZUR ERHOLUNG DER MUSKULATUR UND DER ERSCHÖPFUNG NACH EINEM TRAINING ODER WETTKAMPF ENTWICKELT. LEICHTES UND TRAGBARES GERÄT. DIE MITGELIEFERTER POWER BANK ERMÖGLICHT ES, EINE BEHANDLUNG AUCH SOFORT NACH EINEM WETTKAMPF AM SPIELFELDRAND DURCHZUFÜHREN.

TECHNISCHE DATEN

Ausgang	2
Programme	3
Druck	0-180 mmHg ±10%
Timer	bis 99 Minuten
Stromversorgung	- Netz, 100-240 V AC, 50-60 Hz - Wiederaufladbare Batterie (Power Bank)
Abmessungen	180x190x135 mm
Gewicht	3 Kg

AUSSTATTUNG

· 1 Tasche
· 1 Motoreinheit G-SPORT ³
· 2 Leggings Größe "S" o "M" oder "L"
· 2 Verbindungskabel
· 1 Ladegerät
· 1 Power Bank
· 1 Handbuch

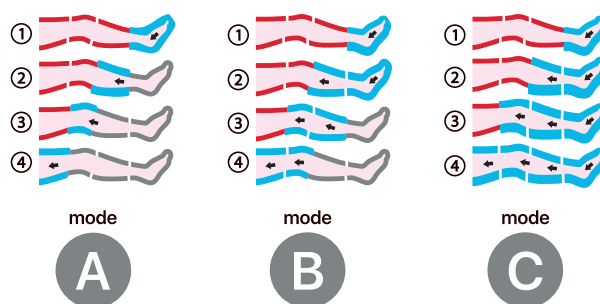

MODE A: Die Abschnitte des Leggings werden eins nach dem anderen auf- und abgeblasen, um eine aktivierende Massage durchzuführen. Perfekt vor einem Wettkampf oder Training.

MODE B: Das Programm sieht das Auf- und Abblasen von zwei Kammern auf einmal vor, um den Rückfluss von Flüssigkeit nach unten zu vermeiden und die Behandlung wirksam und bequem zu machen.

MODE C: Das Programm sieht das sequenzielle Aufblasen von allen Kammern vor und danach das gleichzeitige Abblasen der Kammern. Perfekt für eine tiefe Massage.




PRESSCARE G-SPORT³

PRESSOTHERAPIE | 3 AUFPUMP-PROGRAMME


GRÖSSE DER ZUBEHÖRE (4 SEKTIONEN)

Rev. De_03_2023

LEGGINGS GRÖSSE "S"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 72 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 60 cm mit VERLÄNGERUNG 70 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 37 cm mit VERLÄNGERUNG 42 cm
LEGGINGS GRÖSSE "M"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 82 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 67 cm mit VERLÄNGERUNG 77 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 37 cm mit VERLÄNGERUNG 42 cm
LEGGINGS GRÖSSE "L"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 92 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 74 cm mit VERLÄNGERUNG 84 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 40 cm mit VERLÄNGERUNG 45 cm

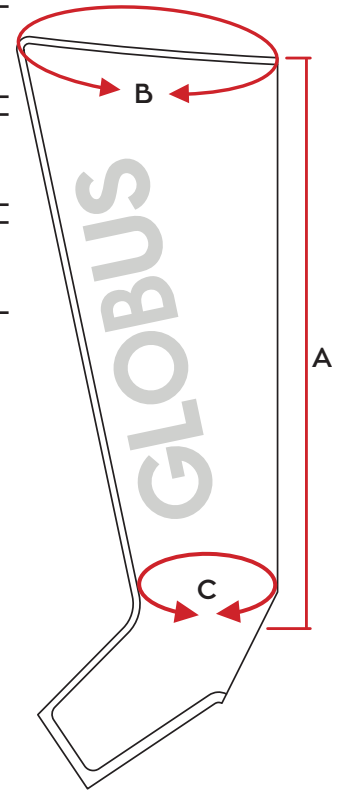

ÄRMELN	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) SCHULTER-UMFANG 43 cm mit VERLÄNGERUNG 53 cm (D) HANDGELENK-UMFANG 31 cm mit VERLÄNGERUNG 36 cm
--------	---

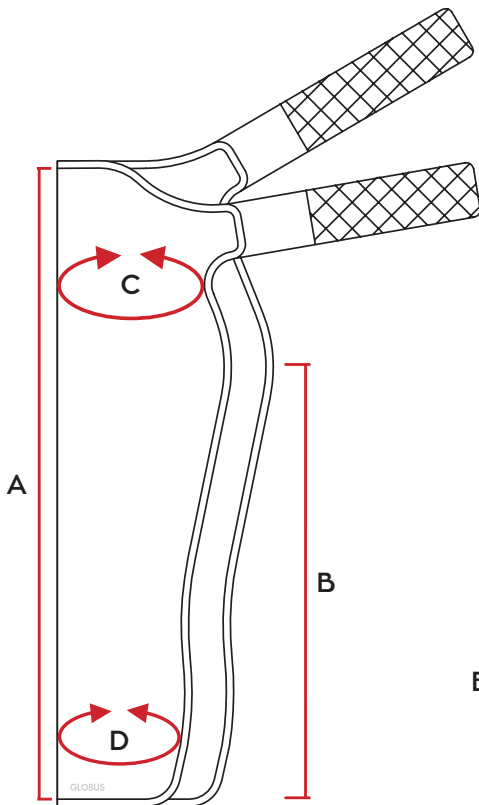

BAUCHBAND	(A) 133 cm - (B) 38 cm BAUCH-UMFANG von 82 cm bis 114 cm
-----------	---



SPLITTERKABEL, um drei Zubehöre gleichzeitig zu verwenden	EINZELBAKEL
---	-------------

ANM. Alle **VERLÄNGERUNGEN** sind als optionales Zubehör vorhanden

Je nach Modell, sind die **ZUBEHÖRE** entweder in der Ausstattung enthalten oder als optional verfügbar.