

PRESSCARE G300M

PRESSOTHERAPIE | 2 AUSGÄNGE - 3 AUFPUMP-SEQUENZEN

MEDIZINISCHES GERÄT FÜR BEHANDLUNGEN IM BEREICH GESUNDHEIT, WELLNESS, ÄSTHETIK UND RELAX. GEEIGNET FÜR LYMPHÖDEME, KREISLAUFPROBLEME, SCHWERE BEINE, ÖDEME, GESCHWOLLENE BEINE ODER ARME, LYMPHDRAINAGE, FLÜSSIGKEITSRETENTION, CELLULITE, HÄMATOM-MASSAGEN, VENOSTASE. ES KÖNNEN GLEICHZEITIG 3 ZUBEHÖRE VERWENDET WERDEN. SUCHEN SIE IMMER IHREN ARZT AUF, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge
2
Programme
3
Druck
0-180 mmHg ±10%
Timer
bis 99 Minuten
Stromnetzversorgung
230 V AC, 50 Hz
Abmessungen
185x180x230 mm
Gewicht
3 Kg

AUSSTATTUNG




· Je nach Modell
· 1 Ladegerät
· 1 Handbuch

MODELLE

	LEGGINGS	ÄRMELN	BAUCHBAND	SPLITTERKABEL
· PRESSCARE G300M-1	1	/	/	/
· PRESSCARE G300M-2	2	/	/	/
· PRESSCARE G300M-3	2	/	1	1
· PRESSCARE G300M-1B	/	1	/	/



CE
0598

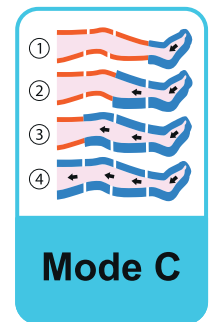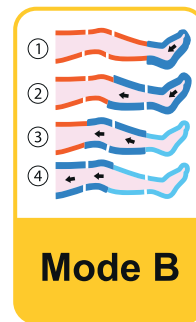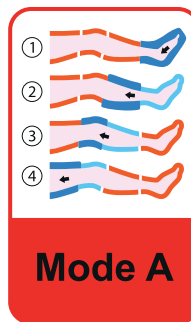

MODE A: Bei diesem Modus werden die Bereiche des Leggings eins nach dem anderen auf- und abgeblasen. Man beginnt beim distalen (Fuß oder Hand) bis zum proximalen.

MODE B: Bei diesem Programm werden zwei Kammern auf einmal aufgeblasen und die Funktion der überlappenden Leggings simuliert.

MODE C: Das Aufpumpen beginnt im Fuß und das Programm behält die vorherigen Kammern aufgeschwollen, bis der ganze Abschnitt aufgeblasen wurde (Beine, Arm oder Bauch).


PRESSCARE G300M

PRESSOTHERAPIE | 2 AUSGÄNGE - 3 AUFPUMP-SEQUENZEN


GRÖSSE DER ZUBEHÖRE (4 SEKTIONEN)

Rev. De_03_2023


LEGGINGS GRÖSSE "S"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 72 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 60 cm mit VERLÄNGERUNG 70 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 37 cm mit VERLÄNGERUNG 42 cm
LEGGINGS GRÖSSE "M"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 82 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 67 cm mit VERLÄNGERUNG 77 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 37 cm mit VERLÄNGERUNG 42 cm
LEGGINGS GRÖSSE "L"	(A) LÄNGE LEISTE - FERSE 92 cm (B) OBERSCHENKEL-UMFANG 74 cm mit VERLÄNGERUNG 84 cm (C) KNÖCHEL-UMFANG 40 cm mit VERLÄNGERUNG 45 cm

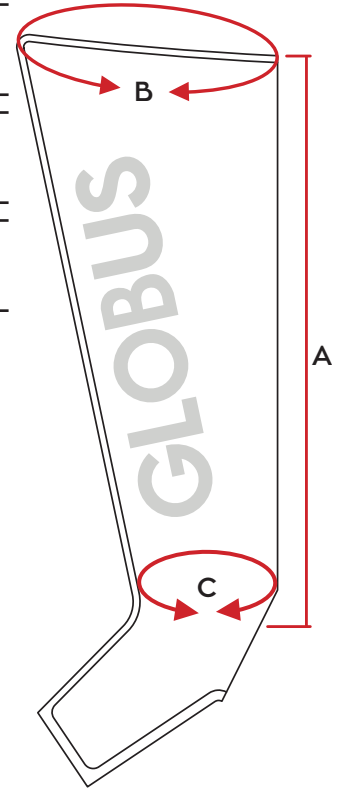

ÄRMELN	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) SCHULTER-UMFANG 43 cm mit VERLÄNGERUNG 53 cm (D) HANDGELENK-UMFANG 31 cm mit VERLÄNGERUNG 36 cm
--------	---

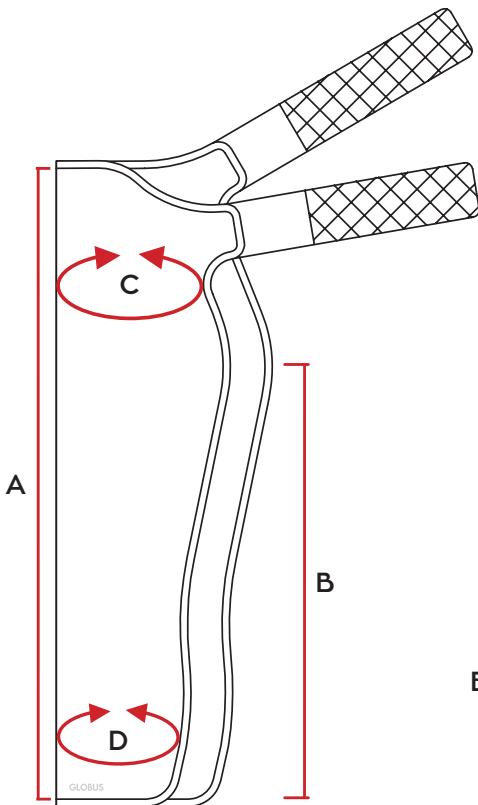

BAUCHBAND	(A) 133 cm - (B) 38 cm BAUCH-UMFANG von 82 cm bis 114 cm
-----------	---

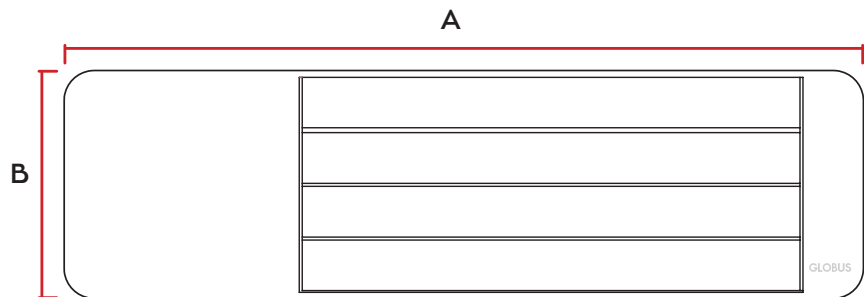

SPLITTERKABEL, um drei Zubehöre gleichzeitig zu verwenden	EINZELBAKEL
---	-------------

ANM. Alle **VERLÄNGERUNGEN** sind als optionales Zubehör vorhanden

Je nach Modell, sind die **ZUBEHÖRE** entweder in der Ausstattung enthalten oder als optional verfügbar.