

PRESSCARE G300M

PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN

DISPOSITIVO MÉDICO CREADO PARA EXIGENCIAS DE SALUD, BIENESTAR, ESTÉTICA Y RELAJACIÓN. INDICADO PARA LINFODEMAS, PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN VENOSA, PESANTEZ EN LAS PIERNAS, EDEMAS, ARTICULACIONES HINCHADAS, LINFODRENAJE, RETENCIÓN HÍDRICA, CELULITIS, MASAJE HEMATOMAS, ESTASIS VENOSA. PUEDE TAMBIÉN SER USADO CON TRES ACCESORIOS AL MISMO TIEMPO. SE RECOMIENDA CONSULTAR A UN MÉDICO ANTES DE SU USO.

TECHNICAL FEATURES

Salidas	2
Programas	3
Presión	0-180 mmHg \pm 10%
Temporizador	hasta 99 min
Alimentación Red	230 V AC, 50 Hz
Tamaño	185x180x230 mm
Peso	3 Kg

DOTACIÓN


- De acuerdo con la configuración deseada
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo

OPCIÓN DE COMPRA


	FUNDA DE PIERNA	FUNDA DE BRAZO	BANDA ABDOMINAL	CABLE DIVISOR
· PRESSCARE G300M-1	1	/	/	/
· PRESSCARE G300M-2	2	/	/	/
· PRESSCARE G300M-3	2	/	1	1
· PRESSCARE G300M-1B	/	1	/	/




CE
0598

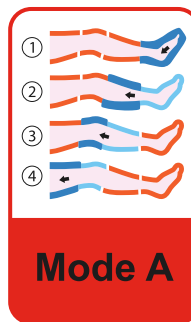

Mode A

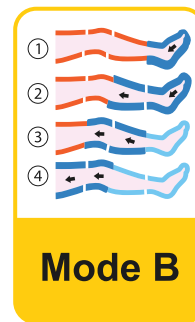

Mode B

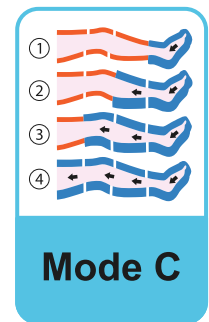

Mode C

MODE A: la secuencia del programa infla y desinfla las cámaras de la pierna de una en una, empezando en la zona más baja (pie o mano) y llegando hasta la zona más alta.

MODE B: la secuencia del programa infla dos cámaras a la vez, simulando la función de un masaje manual.

MODE C: la secuencia del programa ejerce la presión empezando por los pies y manteniendo infladas las cámaras hasta inflar la toda la pierna (o brazo o abdomen) hasta la ingle.



PRESSCARE G300M

PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN


TAMAÑO DE ACCESORIOS (4 SECCIONES)

Rev. Es_01_2022

FUNDAS DE PIERNA TALLA "S"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 72 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 60 cm con EXTENSIÓN 70 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 37 cm con EXTENSIÓN 42 cm
FUNDAS DE PIERNA TALLA "M"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 82 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 67 cm con EXTENSIÓN 77 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 37 cm con EXTENSIÓN 42 cm
FUNDAS DE PIERNA TALLA "L"	(A) LONGITUD INGLE - TALÓN 92 cm (B) CIRCUNFERENCIA MUSLO 74 cm con EXTENSIÓN 84 cm (C) CIRCUNFERENCIA TOBILLO 40 cm con EXTENSIÓN 45 cm
FUNDA DE BRAZO	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCUNFERENCIA HOMBRO 43 cm con EXTENSIÓN 53 cm (D) CIRCUNFERENCIA MUÑECA 31 cm con EXTENSIÓN 36 cm

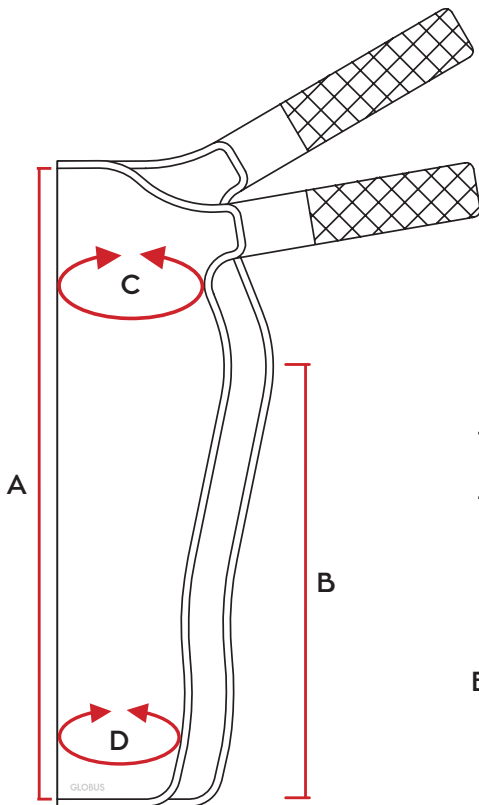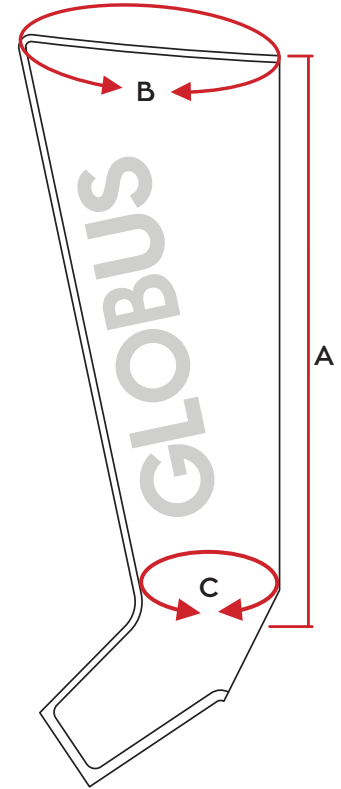

BANDA ABDOMINAL	(A) 133 cm - (B) 38 cm CIRCUNFERENCIA ABDOMEN da 82 cm a 114 cm
-----------------	--

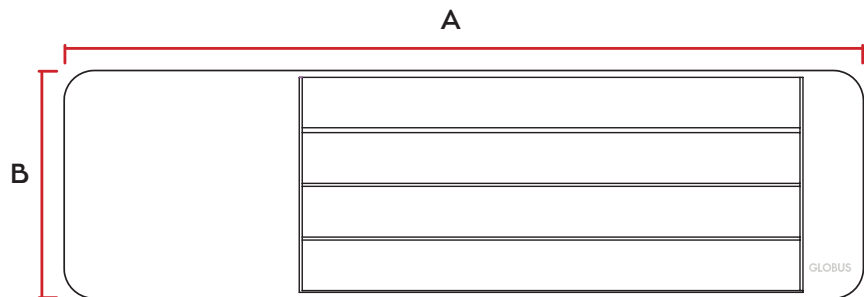

CABLE DIVISOR para usar tres accesorios al mismo tiempo | CABLE INDIVIDUAL

NOTA: Todas las **EXTENSIONES** deben considerarse un accesorio opcional disponible bajo pedido.

Los **ACCESORIOS**, según el tipo de configuración pueden ser opcionales o suministrados