

TECARVET 4000

TECARTERAPIA

TECARVET 4000 ES UN DISPOSITIVO QUE UTILIZA LA DIATERMIA PARA OBTENER EFECTOS TERAPÉUTICOS EXTRAORDINARIOS EN ANIMALES PEQUEÑOS COMO PERROS Y GATOS. EL DISPOSITIVO TRANSFIERE ENERGÍA TANTO EN MODALIDAD CAPACITIVA COMO RESISTIVA. DE ESTA MANERA, EL EFECTO DEL TRATAMIENTO PODRÁ DIRIGirse CON EFICACIA TANTO EN LOS TEJIDOS BIOLÓGICOS MÁS PROFUNDOS COMO EN AQUELLOS SUPERFICIALES.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 4,3" pantalla táctil

Potencia

160W, $\pm 20\%$

Frecuencias de emisión

400KHz, 470KHz, 700KHz, 1000KHz $\pm 10\%$

Modalidades de tratamiento

Capacitiva y resistiva

Electrodos capacitivos

3 tamaños \varnothing (mm 30, 50, 70)

Electrodi resistivi

3 tamaños \varnothing (mm 30, 50, 70)

Alimentación con red eléctrica

100-240V AC, 50-60Hz, 1.8A

Tamaño


170x220x60 mm

Peso

1100 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín profesional
- 1 Dispositivo TECARVET 4000
- 1 Electrodo de retorno (placa)
- 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Bote de crema de ml 250
- 3 Bandas elásticas
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso

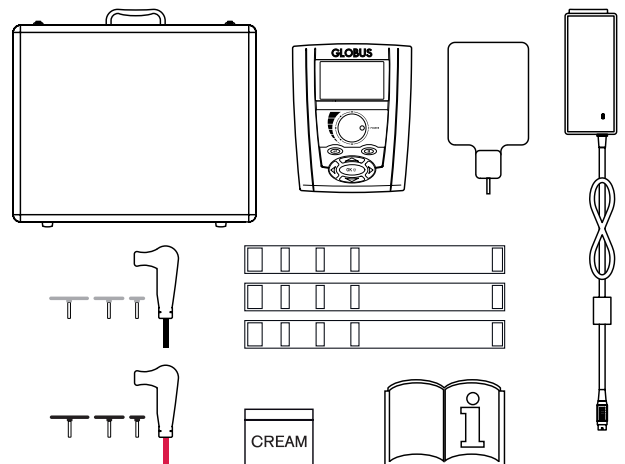

- RESISTIVO
- CAPACITIVO
- BIPOLAR
- MULTI USER
- PROGRAMMABLE
- PANTALLA TÁCTIL
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

TECARVET 4000

TECARTERAPIA

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO/GATO

Hematomas/Edemas

Osteoartrosis capacitiva

Osteoartrosis resistiva

Osteoartritis capacitiva

Osteoartritis resistivoa

Contractura muscular aguda

Contractura muscular crónica

Dorsalgia/Lumbalgia aguda

Dorsalgia/Lumbalgia crónica

Espondiloartrosis

CABALLO

Hematomas/Edemas

Osteoartrosis capacitiva

Osteoartrosis resistiva

Osteoartritis capacitiva

Osteoartritis resistivoa

Contractura muscular aguda

Contractura muscular crónica

Dorsalgia/Lumbalgia aguda

Dorsalgia/Lumbalgia crónica

Espondiloartrosis

Lesiones en tendones

Puntos gatillo