

ULTRASOUNDVET 4000

TERAPIA CON ULTRASONIDO

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 4000 ES EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS TENDONES, MÚSCULOS Y LIGAMENTOS EN PERROS, GATOS Y CABALLOS. TAMBIÉN SE UTILIZA PARA TRATAR ADHERENCIAS DE CICATRIZ Y RIGIDEZ ARTICULAR. ESTA FISIOTERAPIA INSTRUMENTAL PROVOCA UNA ESTIMULACIÓN MECÁNICA TÉRMICA Y ATÉRMICA PARA FACILITAR LA CURACIÓN DE LOS TEJIDOS DAÑADOS DE LOS MÚSCULOS, TENDONES, CÁPSULAS ARTICULARES, LIGAMENTOS Y HUESOS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroiluminada

Salidas

1 con manípulo de Ø 42 mm

Frecuencia

1MHz y 3MHz

Potencia

3W/cm², ±20%

Ciclo de Trabajo

De 10% a 100% en incrementos del 10%

Emisión

Continua y pulsada

Modalidad

En contacto directo y a inmersión

Alimentación

- Red
- Paquete Batería (opcional)

Tamaño


170x220x60 mm

Peso

1370 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Manípulo Ø 42 mm - IP 68
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso

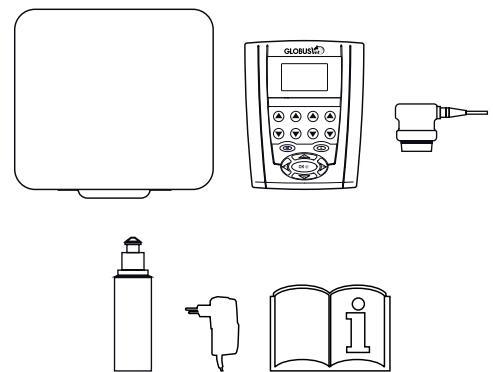

CE



ULTRASOUNDVET 4000

TERAPIA CON ULTRASONIDOS

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO

Osteoartritis crónica

Osteoartritis agudizada

Tendinitis superficial Fase 1

Tendinitis superficial Fase 2

Tendinitis profunda Fase 1

Tendinitis profunda Fase 2

Bursitis

Adherencias cicatriciales

Contracturas musculares

GATO

Osteoartritis crónica

Osteoartritis agudizada

Adherencias cicatriciales

Contracturas musculares

CABALLO

Osteoartritis crónica

Osteoartritis agudizada

Tendinitis superficial Fase 1

Tendinitis superficial Fase 2

Tendinitis profunda Fase 1

Tendinitis profunda Fase 2

Bursitis

Adherencias cicatriciales

Contracturas musculares