

MAGNETOVET 200 avec PANIER THÉRAPEUTIQUE

MAGNETOTHÉRAPIE

MAGNETOVET 200 EST UN APPAREIL DE MAGNÉTHÉRAPIE PORTABLE CAPABLE DE PRODUIRE UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE HAUTE INTENSITÉ. LES IMPULSIONS PRODUISES ONT UN EFFET THÉRAPEUTIQUE ET RÉGÉNÉRATIF SUR LES PRINCIPALES PATHOLOGIES OSTÉOARTICULAIRES AFFECTANT LES ANIMAUX.

POUR SA SIMPLICITÉ D'UTILISATION EN COMBINAISON AVEC LE PANIER THÉRAPEUTIQUE, MAGNETOVET EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AU TRAITEMENT À DOMICILE DE LA DOULEUR CHRONIQUE.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display
Dimensions 2.6", rétro-éclairé
Canaux
2
Intensité disponible
200 Gauss en moyenne par canal avec solénoïdes flex
Fréquence
Réglable en programmation de 5 à 200Hz
Duty Cycle
de 5% à 50% step de 5
Alimentation
- Réseau - Paquet batterie (optionnel)
Dimensions
mm 100x160x35
Poid
gr 440



ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif MAGNETOVET 200
- 1 Panier Thérapeutique mm 700x440
- 1 Solénoïdes flexibles mm 300x100
- 1 Couverture en tissu polaire
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

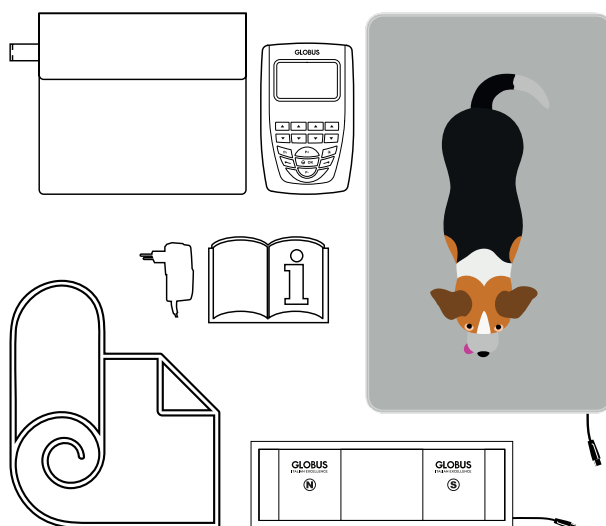

OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G5620 Équipement sans Panier Thérapeutique

- Cod. G6039 Panier thérapeutique en memory foam, 4 bobines, mm 700x440 pour chiens de petite taille et chats. Pour chiens de grande taille, acheter 2 paniers qui seront reliés par le velcro.



LAST 10



OPTION LOCATION



MULTI-UTILISATEUR



FONCTION 1+1



PROGRAMMABLE



ALIMENTATION SECTEUR

MAGNETOVET 200

MAGNETOTHERAPIE

Rev. Fr_03_2021

LISTE PROGRAMMES

CHIEN/CHAT

Fractures

Pseudarthrose

Blessures/ulcères

Ostéoarthrose hanche

Ostéoarthrose genou

Ostéoarthrose coude

Arthrose épaule

Spondylarthrose

Luxation

Cicatrisation

Œdème

Paralysies périphériques

Douleur inflammatoire

CHEVAL

Ostéoarthrose

Blessures/ulcères

Discopathie

Œdème