

ACTIVA 700

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 271 PROGRAMMES

PRODUIT POUR LA BEAUTE E POUR LA FORME PHYSIQUE, CREE AVEC DES PROGRAMMES SPECIFIQUES POUR LE RAFFERMISSEMENT, LA TONIFICATION ET POUR LE RAJEUNISSEMENT. AVEC LA TETE G-TRODE EN DOTATION, L'ELECTROSTIMULATEUR ACTIVA 700 EST UN HAUTE DE GAMME DE L'ELECTROSTIMULATION GLOBUS.

60 BEAUTÉ | 58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 SPORTS SPÉCIAUX | 13 RIDES-PEAU
12 MICRO-COURANTS | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INCONTINENCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150 Hz *

Largeur d'impulsion

40-450 µs *

Puissance

0-120 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

100x160x35 mm


Poids

454 gr

* selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Électrostimulateur ACTIVA 700
- 1 Tête G-Trode
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Flacon de gel
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation

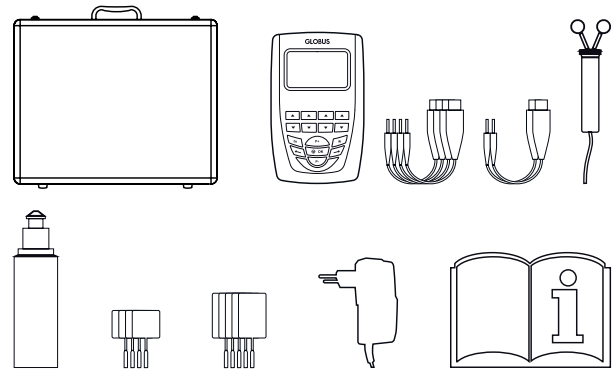

CE
0476



- TENS TENS
- MENS MENS
- 3S 3S
- SPAIN TIME RUN TIME
- Last10 LAST 10
- Favorites FAVORIS
- MULTI USER MULTI USER
- PRO PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE
- STIM LOCK STIM LOCK
- 2+2 FONCTION 2+2
- MY TRAINER MY TRAINER
- AUTO STIM AUTO STIM
- SyS SYNCRO STIM
- Work Time WORK TIME
- BATTERIE RECHARGEABLE BATTERIE RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ACTIVA 700

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 271 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

FITNESS

Raffermissment

Raffermissment Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness aérobie

Prévention crampes

BEAUTÉ

Drainage

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Lipolyse post-accouchement

Massage relax Bio-Pulse

Massage tonifiant

Massage énergétique

Massage connectif

Bras gonflés

Capillarisation du visage

Définition

Ligne

Amélioration du ton de la peau

Drainage post-accouchement

Raffermissment postaccouchement

Raffermissment du sein

Modelage du sein

SPORT

Capillarisation

Échauffement

Echauffement pré-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Réactivité

Récupération post-compétition

Hypertrophie

SPORTS SPÉCIAUX

Course

Ski

Golf

RÉHABILITATION

Atrophie du quadric. (avec prot. au genou)

Rétablissement post-intervention LCA

Prévention Subluxation de l'épaule

TENS / DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

Tens des endorphines

Douleurs menstruelles

Douleur chronique

Cervicaux

Douleur musculaire

Doleur genou

Périarthrite scapulo-humérale

Lombalgie chronique

Bursites - Tendinites

Ostéarthrite

G-PULSE

Micro-lifting du sein

Micro-lifting du décolleté

Micro-lifting du visage

Élasticité de la peau

Effets inesthétiques de la cellulite

Collagène BioSkin

Rides

Rides des yeux

Rides de l'expression

Vergetures

Renforcement des ongles

Bio peeling

Hématome

MICRO-COURANTS

Epicondylite

Périarthrite s.h.

Contusion

Sciatalgie

Lombalgie

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Entorse à l'épaule

Entorse au genou

Inflammation tendineuse

INCONTINENCE

Incontinence mixte

Incontinence d'effort

Incontinence par urgence

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 36 combinaisons de paramètres.

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.