

# EPILMAX PRO

## EPILAZIONE DEFINITIVA | FOTORINGIOVANIMENTO

“EPILMAX PRO” È UN MACCHINARIO INNOVATIVO DALLA DUPLICE FUNZIONE.

**EPILAZIONE DEFINITIVA:** UTILIZZANDO LA NUOVA TECNOLOGIA “LED AD ALTA POTENZA” SARÀ POSSIBILE ELIMINARE PROGRESSIVAMENTE E IN POCHE SEDUTE I PELI IN ECCESSO. IL TRATTAMENTO È INDOLORE GRAZIE AL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA CUTE E ALLA PRECISA REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ.

LA TECNOLOGIA “LED AD ALTA POTENZA” GARANTISCE RISULTATI PROFESSIONALI IN POCHE SEDUTE.

**FOTORINGIOVANIMENTO:** IL DISPOSITIVO PREVEDE DELLE FUNZIONI SPECIFICHE ANTI-AGING PER LA PELLE DEL VISO. LA LUCE “LED AD ALTA POTENZA” STIMOLA LA PRODUZIONE DI COLLAGENE E LA CAPACITÀ RIGENERATIVA DELLE CELLULE, RIDUCENDO LE RUGHE E LEVIGANDO LA PELLE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Tecnologia

Led ad alta potenza

#### Intensità

5 livelli di regolazione da un minimo di 9,5 J/cm<sup>2</sup> fino a 25 J/cm<sup>2</sup>

#### Lunghezza d'onda

780-850nm

#### Temperatura di raffreddamento

0°C-10°C

#### Modalità operativa

- A singolo flash per zone delicate e molto piccole
- A flash continui per un'applicazione a scorrimento, ideale per zone più estese

#### Frequenza

Massimo 180 flash al minuto

#### Alimentazione

Rete 100-240V, 50/60Hz, 2A

#### Dimensione

194x190x82 mm

#### Peso

550 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. **G6576**


· 1 Unità EPILMAX PRO

· 1 Gel Epilmax Pro

· 1 Occhiale protettivo

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale d'uso

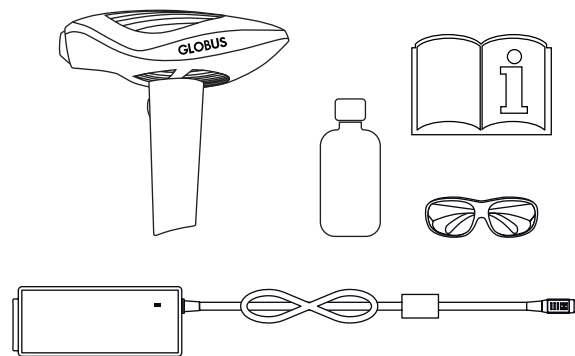

### FUNZIONI SPECIALI

- DESIGN TECNOLOGICO PER UNA EFFICIENTE DISSIPAZIONE DEL CALORE.



- TESTINA CIRCOLARE CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PER UN TRATTAMENTO SENZA DOLORE.
- SISTEMA DI SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI; IL DISPOSITIVO NON PERMETTE DI EFFETTUARE IL FLASH SE LA TESTINA NON È A CONTATTO CON LA PELLE.



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# EPILMAX PRO

EPILAZIONE DEFINITIVA | FOTORINGIOVANIMENTO

Rev. It\_10\_2023