

TECARTERAPIA

Un'unica tecnologia, infinite possibilità di applicazione



Un'ampia gamma di dispositivi per trattamenti in ambito **RIABILITATIVO** e **DERMATOFUNZIONALE** che consente di operare in varie aree in modo efficace, sicuro e veloce.

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

BENVENUTO





Chi siamo

GLOBUS è un'azienda di successo mondiale che produce apparecchiature elettromedicali portatili da oltre 30 anni.

La nostra ampia gamma comprende linee complete di prodotti per l'uso in **FISIOTERAPIA, SPORT, VETERINARIA** ed **ESTETICA**.

La nostra missione

La missione di **GLOBUS** è quella di promuovere la salute e il benessere nel mondo, fornendo prodotti di alta qualità per i professionisti che operano in ambito riabilitativo e fisioterapico, nonché per gli utenti privati che desiderano migliorare la propria qualità di vita in totale sicurezza e beneficiare delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato.

La nostra storia

GLOBUS è stata fondata nel 1984 a Codognè, in provincia di Treviso (Italia), dall'attuale Presidente e Amministratore Delegato, Pierpaolo Lucchetta, medaglia di bronzo nella pallavolo alle Giochi Olimpici di Los Angeles e pluripremiato professionista fino al 1994. L'esperienza del suo Presidente come atleta di alto livello è stata fondamentale per **GLOBUS** per progettare e sviluppare diverse linee di prodotti per il recupero post-infortunio, il rafforzamento muscolare e il miglioramento generale delle prestazioni sportive. Per sviluppare prodotti sicuri, efficaci e tecnologicamente avanzati, **GLOBUS** collabora con diverse università e istituti di ricerca in tutto il mondo e si attiene alle linee guida scientifiche più rigorose.

Oggi, **GLOBUS** è una rinomata azienda nel settore della riabilitazione e della fisioterapia, che esporta in più di 50 paesi in tutto il mondo. I prodotti **GLOBUS** sono certificati UNI CEI EN ISO 13485:2016 e Sistema di Garanzia della Qualità CE in Europa, FDA negli Stati Uniti e IEx in Brasile.

Tecnologia TECAR

CALORE RIGENERANTE

TECAR è una terapia innovativa che utilizza la produzione di calore endogeno per il trattamento di traumi, patologie muscolo-scheletriche e in ambito dermatofunzionale.

Il calore generato dal movimento delle cariche elettriche stimola i processi di recupero e ha un effetto antinfiammatorio e analgesico.

METODI DI TRATTAMENTO

La Tecarterapia utilizza una radiofrequenza a bassa intensità trasmessa attraverso due tipi di elettrodi, **Capacitivo** e **Resistivo**, che vengono utilizzati a seconda dei tessuti da trattare.





• METODO RESISTIVO

Il metodo resistivo viene eseguito con elettrodi non isolati ed è indicato per il trattamento di tessuti ad alta resistenza: tessuto osseo, cartilagine, tendinite, legamenti, fascia e tessuti fibrotici. Con questo metodo è possibile focalizzare con precisione l'azione terapeutica.



• METODO CAPACITIVO

Il metodo capacitivo utilizza una piastra e un elettrodo isolato per trattare i tessuti con bassa resistenza alla corrente: tessuto cutaneo, tessuto connettivo, sistema circolatorio, sistema linfatico.

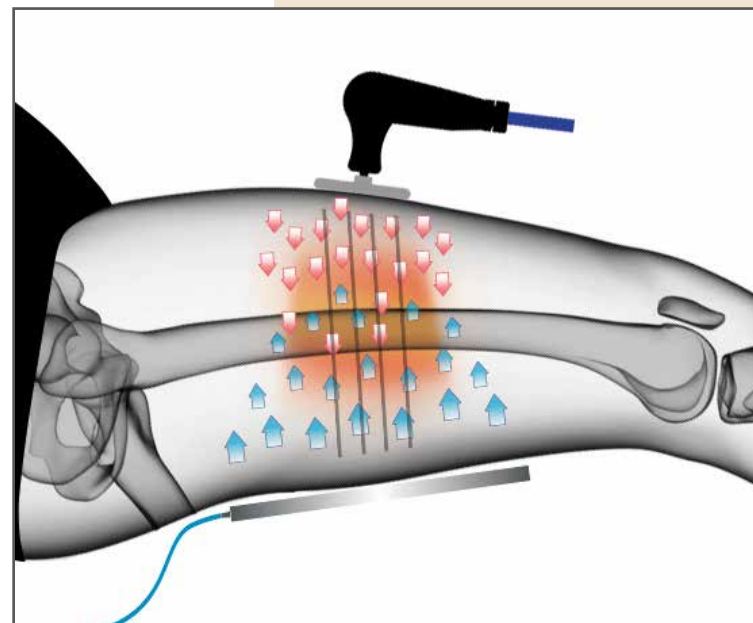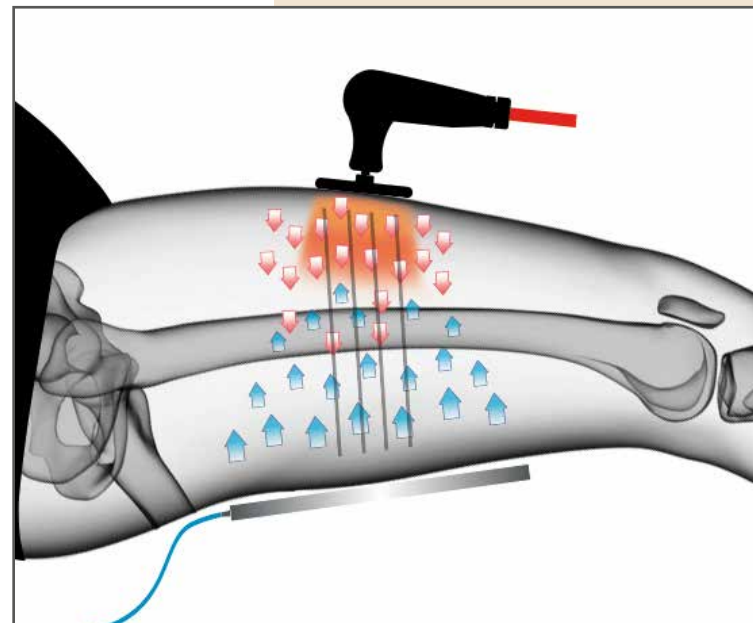



EFFETTI BIOLOGICI

Indipendentemente dal tipo di elettrodo utilizzato, gli effetti biologici della Tecar sono principalmente:

- **BIOSTIMOLANTE**
- **ANTALGICO**
- **ANTINFIAMMATORIO**
- **DECONTRATTURANTE**
- **VASODILATATORE**

FUNZIONI SPECIALI DEI NOSTRI DISPOSITIVI

L'intuitivo touch screen consente di accedere rapidamente alla gamma di FUNZIONI SPECIALI che vi permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità dei nostri dispositivi.



ATLANTE DEI TRATTAMENTI



MODALITÀ MANI LIBERE



MULTIFREQUENZA



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE



TRATTAMENTI IN ATERMIA



TRATTAMENTI PULSATI

Le funzioni speciali dei nostri dispositivi

*più professionali,
più completi*

6


01



ATLANTE DEI TRATTAMENTI

Ti guida nella terapia

Sfoglia l'**ATLANTE** e scegli la patologia da trattare. Troverai i parametri di funzionamento e le immagini esplicative relative al posizionamento degli elettrodi.

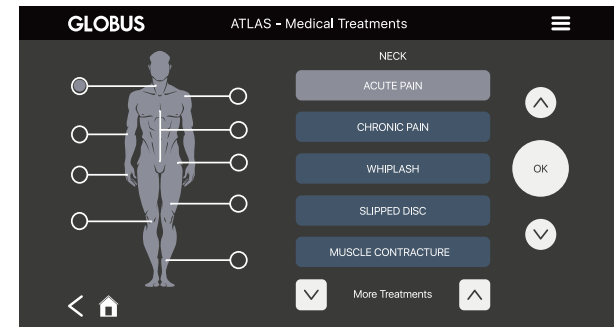

MODALITÀ MANI LIBERE

Raddoppia le possibilità terapeutiche

La modalità **MANI LIBERE** utilizza due o più elettrodi fissi che vengono posizionati sulla zona da trattare. Il terapeuta in questo modo può effettuare al contempo delle manovre sul paziente aumentando l'efficacia del trattamento.



02



MULTIFREQUENZA

Energia alla profondità desiderata

La **TECARTERAPIA GLOBUS** può lavorare con diverse frequenze per focalizzare l'obiettivo terapeutico.

1. OSSA E ARTICOLAZIONI

300kHz / 400kHz / 448kHz

2. MUSCOLI E TESSUTI MOLLI

470kHz / 700kHz

3. EPIDERMIDE, DERMA, IPODERMA

1000kHz / 1200kHz

03

04



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Il programma favorisce l'assorbimento del principio attivo di un farmaco o di una crema.



06




TRATTAMENTI IN ATERMIA

Biostimolazione dei tessuti senza generazione di calore per la cura di malattie che non possono essere trattate con le alte temperature.



SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE

Il programma consente, all'interno del trattamento stesso, di trasferire uniformemente l'energia a diverse profondità.

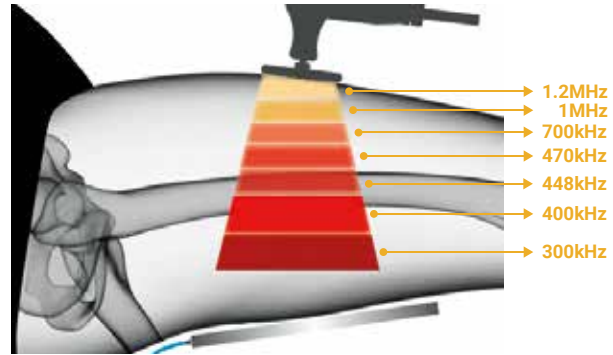


05



TRATTAMENTI PULSATI

Programmi di emissione pulsata con diversi cicli di lavoro per mantenere elevata l'energia trasferita ai tessuti, mantenendo un controllo della temperatura adeguato.

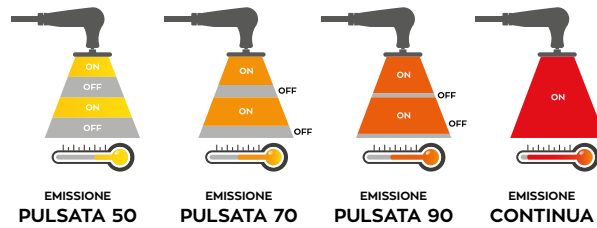

07



KIT INTIMA

strumenti avanzati per migliorare il tono del pavimento pelvico

La precisione dei nostri dispositivi TECAR permette di agire in modo efficace e in totale sicurezza e comfort, anche per risolvere problemi direttamente legati all'area genitale.

Per questo motivo **GLOBUS** ha creato il **KIT INTIMA**, con accessori specifici che permettono di effettuare trattamenti interni ed esterni per migliorare la salute del pavimento pelvico, sia nell'uomo che nella donna, e per ripristinare il tono e l'elasticità vaginale, oltre a garantire ottimi risultati in caso di cicatrici da parto.

Il trattamento in modalità capacitiva del **KIT INTIMA** consente un'azione rigenerante profonda sulle mucose nel massimo comfort.

Inoltre, in abbinamento ai manipoli tradizionali e al **KIT MANI LIBERE**, fornisce un sistema completo per aumentare il tono del pavimento pelvico e ripristinarlo.







KIT FASCIA TOOLS

*strumenti avanzati per la
mobilizzazione dei tessuti molli*

La Tecarterapia è una tecnologia che si sta sempre più diffondendo nel mondo della fisioterapia come strumento indispensabile per ogni professionista che vuole ottenere ottimi risultati.

GLOBUS ha coniugato la tecnologia TECAR alle tecniche strumentali di mobilizzazione dei tessuti molli (IASTM), unendo così i vantaggi di queste due straordinarie possibilità terapeutiche.

I **GLOBUS FASCIA TOOLS** sono speciali manipoli resistivi che, grazie alla loro forma anatomica, sono particolarmente efficaci per la mobilizzazione e il trattamento avanzato di tutte le affezioni dei tessuti molli.

La combinazione del trattamento manuale con manipoli miofasciali, insieme all'energia di **TECAR GLOBUS**, offre una nuova e straordinaria possibilità di trattamento.

I risultati saranno sorprendenti!



TECARTERAPIA
GLOBUS DiaCaRe

*per i professionisti della
riabilitazione e dello sport*



TECARTERAPIA GLOBUS DiaCaRe

ideale nella RIABILITAZIONE e nel trattamento degli SPORTIVI grazie ai suoi risultati particolarmente rapidi

I benefici della **TECARTERAPIA GLOBUS** sono importanti per ritrovare la salute.

La **TECARTERAPIA GLOBUS** viene utilizzata in tutte le patologie osteoarticolari e muscoloscheletriche in cui sono presenti dolore, infiammazione o gonfiore e può portare risultati ottimali dopo poche sedute, riducendo i tempi di recupero funzionale e accelerando il processo di guarigione dei tessuti lesi.

Quindi il vantaggio principale è che riesce a ridurre l'infiammazione dei tessuti e, di conseguenza, il dolore nella sua fase acuta senza essere una terapia invasiva.

La **TECARTERAPIA GLOBUS** viene utilizzata sia nell'ambito della RIABILITAZIONE per il trattamento di pazienti affetti da lombalgie, epicondiliti, dolori muscolari e stiramenti, sia nell'ambito SPORTIVO per prevenire e curare alcune patologie e traumi causati da carichi eccessivi durante l'allenamento o da lesioni causati durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

01

ideale per
Riabilitazione dei disturbi muscoloscheletrici

- *Tendinopatie*
- *Recupero post-trauma*
- *Disturbi osteo-articolari*
- *Recupero post-operatorio*
- *Disturbi muscolari e miofasciali*

02

ideale per
Riabilitazione sportiva

- *Decontratturante*
- *Warm-up profondo*
- *Prevenzione degli infortuni*
- *Recupero muscolare post-allenamento*
- *Miglioramento della mobilità articolare*

03

ideale per
Condizioni linfatiche e vascolari

- *Vasodilatazione*
- *Drenaggio degli ematomi*
- *Ossigenazione dei tessuti*
- *Drenaggio linfatico post-operatorio*

TECARTERAPIA GLOBUS Tecar Beauty Med

*per i professionisti
della medicina estetica,
della chirurgia plastica e
della bellezza*



TECARTERAPIA

GLOBUS Tecar Beauty Med

in ambito DERMATOFUNZIONALE, con trattamenti fisioestetici non invasivi, per la cura e la salute del tessuto cutaneo e sottocutaneo

La **TECARTERAPIA GLOBUS** agisce con straordinaria efficacia nel profondo del metabolismo cellulare e consente di ottenere risultati straordinari nelle disfunzioni, anche croniche, come nessun'altra tecnologia è in grado di fare. Grazie alla versatilità dei nostri dispositivi sarà possibile intervenire, ad esempio, sulla riattivazione dei tessuti, sulle cellule sclerotiche o su edemi ed ematomi profondi con risultati sorprendenti già dal primo trattamento.

Con i dispositivi **TECAR BEAUTY MED** di **GLOBUS** sarà inoltre possibile stimolare la produzione di collagene ed elastina nella pelle in modo eccezionalmente preciso e controllato, stimolando i processi naturali di rigenerazione dei tessuti e riducendo notevolmente i tempi di recupero e guarigione, tra l'altro, di cicatrici post-chirurgiche e cheloidi.

La precisione dei nostri dispositivi **TECAR BEAUTY MED** permette di intervenire efficacemente e con assoluta sicurezza e comfort anche nella risoluzione di problemi strettamente legati alla sfera più intima.

Sono stati studiati appositamente accessori specifici per trattamenti sia interni che esterni, mirati a migliorare la salute del pavimento pelvico, sia nell'uomo che nella donna, e a ripristinare il tono e l'elasticità vaginale, oltre a garantire risultati ottimali in caso di cicatrici da parto.

01

ideale per
Riattivare il metabolismo cellulare

- **Adiposità localizzata**
- **Lassità cutanea e ipotonia tissutale**
- **Riassorbimento di edemi ed ematomi**
- **Cellulite edematosa, fibrosa e sclerotica**
- **Disfunzione della circolazione venosa e linfatica**

02

ideale per
Stimolare la salute della pelle

- **Ulcere e ustioni**
- **Preparazione prechirurgica**
- **Cheloidi e cicatrici ipertrofiche**
- **Trattamenti dermatofunzionali antiaging viso**
- **Edema e dolore post chirurgia estetica e ricostruttiva**

03

ideale per
Ristabilire il comfort intimo

- **Lassità vaginale**
- **Cicatrici da parto**
- **Diastasi addominale**
- **Riabilitazione perineale uomo e donna**

Linea professionale DiaCaRe

DIACARE 7000

- Protocolli Medicali
- Potenza Nominale (NP): 350W \pm 10%
- Schermo: Touchscreen a colori da 7"
- Frequenze di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 230V AC, 50-60Hz, 3,7A



DIACARE 5000

- Protocolli Medicali
- Potenza Nominale (NP): 180W \pm 10%
- Schermo: Touchscreen a colori 4,3"
- Frequenze di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



Linea professionale Tecar Beauty Med

TECAR BEAUTY 7000 MED

- Protocolli estetici e medicali
- Potenza Nominale (NP): 350W \pm 10%
- Schermo: Touchscreen a colori da 7"
- Frequenze di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 230V AC, 50-60Hz, 3,7A



TECAR BEAUTY 6000 MED

- Protocolli estetici e medicali
- Potenza Nominale (NP): 180W \pm 10%
- Schermo: Touchscreen a colori da 4,3"
- Frequenze di emissione: 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, \pm 10%
- Alimentazione a rete: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



I nostri accessori

KIT MANI LIBERE PLUS



MANIPOLI NEUTRO ATTIVO E BIPOLARE



ELETTRODI CONVESSI CAPACITIVI e RESISTIVI



KIT 5 ELETTRODI CAPACITIVI CONCAVI

COPERTURE PER ELETTRODI



KIT INTIMA



MANIGLIA NEUTRA ATTIVA

I nostri accessori

PIASTRE NEUTRE - KIT FASCIA TOOLS - MANIPOLI ED ELETTRODI





Chi utilizza **TECAR GLOBUS**

Società sportive e atleti professionisti testimoniano le elevate prestazioni dei nostri dispositivi

João Félix Sequeira - FC Chelsea



Thiago Silva - FC Fluminense



Wilfredo León Venero - Sir Susa Vim Perugia



Fabio Ricci - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Federazione calcistica del Brasile



Club Atlético de Madrid



GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

Per conoscere in dettaglio le caratteristiche tecniche dei nostri dispositivi

visita il sito web
globuscorporation.com

o scansiona il QR Code



DOMINO SRL
Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA



(+39) 0438 7933

Materiale informativo per gli operatori del settore.

Le immagini e le caratteristiche tecniche contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento senza preavviso. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per vedere i video sui prodotti e per trovare i nostri distributori, visitate il nostro sito web.

G6547 - Rev. It_12_2024